

signia

Pure 312 Nx, Pure 13 Nx, Pure 13 Nx [T]

Kasutusjuhend



Made for
iPhone | iPad | iPod

Sisu

Tere tulemast!	4
Teie kuuldeaparaadid	5
Aparaadi tüüp	5
Kuuldeaparaatide tundmaõppimine	6
Osad ja nimetused	7
Juhtnupud	10
Kuulmisprogrammid	11
Funktsioonid	12
Patareid	13
Aku suurus ja käsitsemisnõuanded	13
Akude vahetamine	14
Igapäevane kasutamine	15
Sisse- ja väljalülitamine	15
Kuuldeaparaatide sisestamine ja eemaldamine	16
Helitugevuse reguleerimine	20
Kuulmisprogrammi muutmine	21
Täiendav kohandamine (valikuline)	21
Erilised kuulmisolud	22
Kasutamine telefoni teel suhtlemisel	22
Heli voogesitus iPhone'iga	23
Lennukirežiim	23
Heli induktsioonsilmused (valikuline)	24

Hooldus	25
Kuuldeaparaadid	25
Kuularid	26
Professionaalne hooldus	28
Lisateave	29
Ohutusteave	29
Tarvikud	29
Selles dokumendis kasutatavad sümbolid	29
Tõrkeotsing	30
Riigipõhine teave	32
Hooldus ja garantii	35

Tere tulemast!

Täname, et valisite oma igapäevasteks saatjateks meie kuuldeaparaadid. Nagu kõige uuega, võtab ka nendega tutvumine veidi aega.

See juhend koos kuulamisspetsialisti toega aitab teil mõista eeliseid ja paremat elukvaliteeti, mida kuuldeaparaadid pakuvad.

Kuuldeaparaatide kõige tõhusamaks ärakasutamiseks on soovitatav kanda neid iga päev kogu päeva jooksul. See aitab teil nendega kohaneda.



ETTEVAATUST

Lugege kindlasti see kasutus-, samuti ohutusjuhend põhjalikult läbi. Kahjustuste või vigastuste vältimiseks järgige ohutusteavet.

Teie kuuldeaparaadid

i Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse valikulisi funktsioone, mis võivad teie kuuldeaparaatidel olemas olla või puududa.
Paluge oma kuulamisspetsialistil näidata funktsioone, mis teie kuuldeaparaatidel olemas on.

Aparaadi tüüp

Teie kuuldeaparaatide mudel on RIC (vastuvõtja kanalis). Vastuvõtja asub kõrvakanalis ja on aparaadiga ühendatud vastuvõtja kaabli kaudu. Need aparaadid ei ole mõeldud alla 3-aastastele lastele ega isikutele, kelle arenguline vanus jääb alla 3 aasta.

Juhtmeta funktsioonid võimaldavad kasutada täiustatud audioloogilisi funktsioone ja kahte kuuldeaparaati sünkroonida.

Teie kuuldeaparaadil on funktsioon Bluetooth® low energy* tehnoloogia, mis võimaldab lihtsat andmevahetust nutitelefoniga ja sujuvat heli voogesitust iPhone'iga**.

* Seadme Bluetooth sõnatähis ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning selle toote seaduslik tootja kasutab neid tähiseid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja -nimed kuuluvad nende omanikele.

** iPad, iPhone ja iPod touch on ettevõtte Apple Inc. USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.

Kuldeaparaatide tundmaõppimine

On soovitatav, et oma uute kuldeaparaatidega tutvuksite. Proovige aparate käes hoides juhtelemente kasutada ja pöörake tähelepanu nende asukohale aparaadil. See muudab teie jaoks kuldeaparaatide kandmisel juhtelementide tunnetamise ja nende vajutamise lihtsamaks.


i

Kui teil on kuldeaparaadi kandmisel raskusi juhtseadiste vajutamisega, võite kasutada seadmete juhtimiseks kaugjuhtimispulti. Spetsiaalse nutitelefoni rakendusega on teil veelgi rohkem juhtimisvõimalusi.

Osad ja nimetused


Kasutusjuhendis kirjeldatakse mitut liiki kuuldeaparaate. Vaadake järgmistelt piltidelt, mis tüüpi kuuldeaparaati te kasutate.

Pure 312 Nx

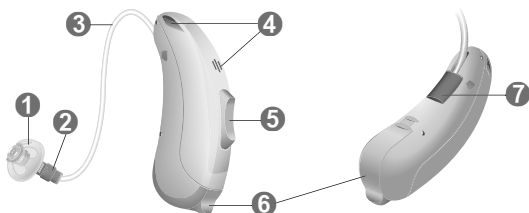



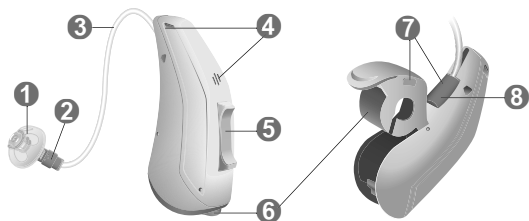

- | | |
|---------------------|---|
| 1 Kuular | 5 Klahvilüli (juhtnupp) |
| 2 Vastuvõtja | 6 Akukamber (toitelüli) |
| 3 Vastuvõtja kaabel | 7 Poolenäidik
(punane = parem kõrv,
sinine = vasak kõrv)
ja vastuvõtja ühendus |
| 4 Mikrofoni avad | |

Pure 13 Nx



-
- | | |
|---------------------|--|
| ① Kuular | ⑤ Klahvlüliti (juhtnupp) |
| ② Vastuvõtja | ⑥ Akukamber (toitelüliti) |
| ③ Vastuvõtja kaabel | ⑦ Poolenäidik
(punane = parem kõrv,
sinine = vasak kõrv) |
| ④ Mikrofoni avad | ⑧ Vastuvõtja ühendus |
-

Saate kasutada järgmiseid standardseid kuulareid.

Standardseid kuularid	Suurus
<input type="radio"/>  Click Sleeve (ventilatsiooniga või suletud)	
<input type="radio"/>  Ühekordne Click Dome™ (avatud või suletud)	
<input type="radio"/>  Click Dome poolavatud	
<input type="radio"/>  Kahekordne Click Dome	


Standardseid kuulareid saab hõlpsasti vahetada.
Lisateavet vt jaotisest „Hooldus”.

Kohandatud kuularid

- | | |
|---|-----------------|
| <input type="radio"/>  | Kohandatud kest |
| <input type="radio"/>  | Click Mold™ |

Juhtnupud

Klahvlülitiga saate näiteks helitugevust reguleerida või kuulmisprogramme vahetada. Teie kuulmisspetsialist on programminud klahvlülile teie soovitud funktsioonid.

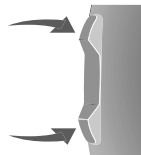

Klahvlüliti funktsioon

L **R**

Lühike vajutus:

Programm üles/alla

Helitugevuse
suurendamine/vähendamine

Tinnituse ravisignaali taseme
suurendamine/vähendamine

Teleri voogedastus sees/väljas

Hoidke umbes 2 sekundit all.

Programm üles/alla

Helitugevuse
suurendamine/vähendamine

Tinnituse ravisignaali taseme
suurendamine/vähendamine

Teleri voogedastus sees/väljas

Klahvlüliti funktsioon

L R

Hoidke üle 3 sekundi all.

Ooterežiim/sisselülitamine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

Lennurežiimi aktiveerimine ja inaktiveerimine.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	-----------------------	-----------------------

L = vasak, R = parem

i

Kuulmisprogrammide muutmiseks ja kuuldeaparaadi helitugevuse reguleerimiseks võib ka kaugjuhtimispuhtri kasutada. Meie nutitelefoni rakendusega on teil veelgi rohkem juhtimisvõimalusi.

Kuulmisprogrammid

1

2

3

4

5

6

Lisateavet vt jaotisest „Kuulmisprogrammi muutmine”.

Funktsioonid

- Viivitusega käivitus** võimaldab kuuldeaparaate ilma vilinata sisestada.
Lisateavet vt jaotisest „Sisse- ja väljalülitamine”.
- Tinnituse ravifunktsioon** loob heli, mis juhib tähelepanu tinnituselt eemale.
- telecoil'** on integreeritud akukambrisse, võimaldades kuuldeaparaadil ühenduda heliinduktsiooni ahelatega.
Lisateavet vt jaotisest „Heli induktsioonsilmused”.

Patareid

Kui aku on tühjenemas, muutub heli nõrgemaks või kuulete hoiatussignaali. Aku tüüp määrab, kui pika aja tagant peate neid vahetama.

Aku suurus ja käsitlemisnõuanded

Küsige kuulmisspetsialistilt soovitatavate akude kohta.


Aku suurus: 312 13

- Kasutage kuuldeaparaadi korral alati õiges suuruses akusid.
- Kui te ei plaani kuuldeaparaati mitu päeva kasutada, eemaldage sellest akud.
- Kandke varuakusid alati kaasas.
- Eemaldage tühjad akud kohe ja järgige akude lõpphiustamise kohalikke utiliseerimisreegleid.


Akude vahetamine

Aku eemaldamine.

- ▶ Avage akukamber.

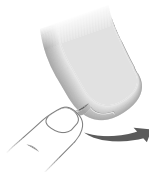

- ▶ Kasutage aku väljatõmbamiseks magnetpulka. Magnetpulk on saadaval tarvikuna.

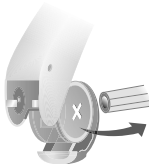

Aku sisestamine.

- ▶ Kui akul on kaitsekile, eemaldage see ainult siis, kui akut kasutate.



- ▶ Sisestage aku nii, et sümbol + jääks ülespoole (vt pilti).



- ▶ Sulgege akukamber ettevaatlikult. Kui tunnete takistust, ei ole aku õigesti sisestatud.

Ärge proovige akukambrit jõuga sulgeda.
See võib kahjustuda.

Igapäevane kasutamine

Sisse- ja väljalülitamine

Teil on kuuldeaparaatide sisse- või väljalülitamiseks järgmised võimalused.

Akukambri kaudu

- ▶ Sisselülitamine Sulgege akukamber.
Seatakse **vaikimisi määratud** helitugevus ja kuulmisprogramm.
- ▶ Väljalülitamine Avage akukamber esimese tõkkeni.

Klahvlülitit kaudu.

- ▶ Sisse- või väljalülitamine: vajutage klahvlülitit ja hoidke seda mitu sekundit all. Klahvlülitit sätete vaatamiseks vt jaotist „Juhtnupud”.
Pärast sisselülitamist säilitatakse **varem** kasutatud helitugevus ja kuulmisprogramm.

Kuldeaparaate kandes võib hoiatustoon märku anda, kui aparaat sisse või välja lülitatakse.

Viivitusega käivituse aktiveerimisel lülituvad kuuldeaparaadid pärast mitmesekundilist viivitust sisse. Selle aja jooksul saate kuuldeaparaadid ilma ebameeldivat kajavat vilinat kuulmata kõrva sisestada. „Viivitusega käivituse” saab aktiveerida teie kuulmisspetsialist.

Kuldeaparaatide sisestamine ja eemaldamine

Teie kuldeaparaadid on teie vasaku ja parema kõrva jaoks peenhäälestatud. Värvilised märgid näitavad pooli järgmiselt:


- punane märk = parem kõrv;
- sinine märk = vasak kõrv.




Kuldeaparaadi sisestamine.

- ▶ Click Sleeves jaoks jälgige hoolikalt, et Click Sleeve looge joonduks vastuvõtja kaabli lookega.


Õige:

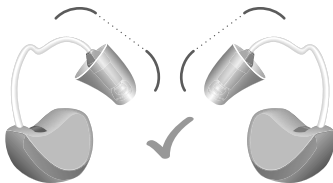

Väär:

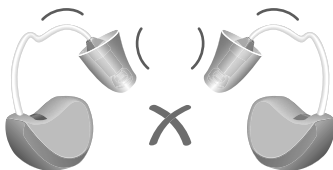

- ▶ Hoidke vastuvõtja kaablit kuularile lähemal olevast lookest.
 - ▶ Suruge kuular ettevaatlikult kuulmekäiku ❶.
 - ▶ Pöörake seda kergelt, kuni see hästi paigal püsib.
- Avage ja sulgege suu, et vältida õhu kogunemist kõrvakanalisse.
- ▶ Tõstke kuuldeaparaati ja lükake see kõrva peale ❷.

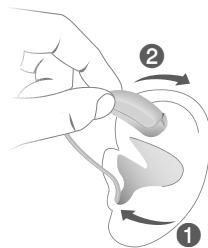

ETTEVAATUST

Vigastusoh!

- ▶ Sisestage kõrva käiv osa ettevaatlikult ja mitte liiga sügavale kõrva.



- Lihtsam on sisestada **parem** kuuldeaparaat **parema** käega ja **vasak** kuuldeaparaat **vasakuga**.
- Kui teil on kuulari paigaldamisega raskusi, kasutage kõrvanibu kergelt allapoole tõmbamiseks teist kätt. See avab kuulmekäigu ja hõlbustab kuulari paigaldamist.


Valikuline kinnitusjuhe aitab kuularil kindlalt kõrvas püsida. Kinnitusjuhtme paigutamiseks toimige järgmiselt:

- ▶ Painutage kinnitusjuhet ja paigutage see ettevaatlikult kõrva kuulmekäigu põhja (vt pilti).



Kuuldeaparaadi eemaldamine.

- ▶ Tõstke kuuldeaparaati ja libistage see kõrva peale **1**.
 - ▶ Kui teie kuuldeaparaat on varustatud kohandatud kesta või üksusega Click Mold, eemaldage see, tõmmates väikest eemaldamisjuhet kukla poole.
 - ▶ Kõikide teiste kuularite puhul toimige järgmiselt: Haarake kõrvakanalis olevast kuularist kahe sõrmega ja tõmmake see ettevaatlikult välja **2**.
- Ärge tõmmake vastuvõtja kaablit.

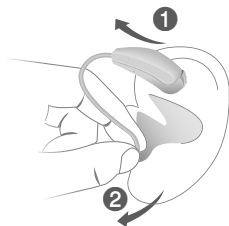

ETTEVAATUST

Vigastusohht!

- ▶ Väga harvadel juhtudel võib kõrva käiv osa kuuldeaparaadi eemaldamisel teie kõrva jääda. Kui nii juhtub, laske kõrva käiv osa eemaldada arstil.

Pärast kasutamist puhastage ja kuivatage kuuldeaparaate. Lisateavet vt jaotisest „Hooldus”.

Helitugevuse reguleerimine

Teie kuuldeaparaadid reguleerivad heli kuulmisolukorrale vastavaks automaatselt.

- ▶ Kui eelistate helitugevust käsitsi reguleerida, vajutage klahvlülitit.

Klahvlüliti sätete vaatamiseks vt jaotist „Juhtnupud”.

Lisesignaal võib näidata helitugevuse muutumist. Kui on saavutatud maksimaalne või minimaalne helitugevus, võite kuulda lisesignaali.



Kuulmisprogrammi muutmine

Teie kuuldeaparaadid reguleerivad heli kuulmisolude järgi automaatselt.

Teie kuuldeaparaatidel võib olla ka mitmeid kuulmisprogramme, mis võimaldavad vajaduse korral heli muuta. Lisasignaali võib näidata programmi muutumist.

- ▶ Kuulmisprogrammi muutmiseks vajutage klahvlülilit.
Klahvlüliti sätete vaatamiseks vt jaotist „Juhtnupud”.
Kuulmisprogrammide loendi nägemiseks vt jaotist „Kuulmisprogrammid”.

Rakendatud on vaikimisi helitugevus.

Täiendav kohandamine (valikuline)

Kuuldeaparaadi juhtseadistega saab muuta ka muid funktsioone, nt tinnituse ravisignaali taset.


Juhtnuppude sätete vaatamiseks vt jaotist „Juhtnupud”.



Erilised kuulmisolud

Kasutamine telefoni teel suhtlemisel

Kui suhtlete telefoni teel, hoidke telefoni vastuvõtjat veidi kõrvast kõrgemal. Kuuldeaparaat ja telefoni vastuvõtja peavad olema vastakuti. Keerake vastuvõtjat veidi nii, et kõrv ei oleks täiesti kaetud.

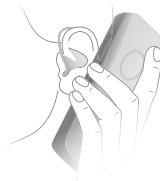

Telefoniprogramm

Võite telefoni kasutamisel eelistada kindlat helitugevust. Paluge oma kuulmisspetsialistil telefoniprogramm konfigureerida.

- ▶ Lülitage telefoniga rääkimisel mis tahes ajal telefoniprogrammile.

Kui telefoniprogramm on teie kuuldeaparaatide jaoks konfigureeritud, on see loetletud jaotises „Kuulmisprogrammid”.

Heli voogesitus iPhone'iga

Teie kuuldeaparaat vastab nõuetele **Valmistatud iPhone'i jaoks**. See tähendab, et saate oma telefoniga võtta vastu telefonikõnesid ja edastada muusikat otse iPhone'ist kuuldeaparaati.

Lisateavet ühilduvate iOS-i seadmete, paarisühendamise, heli voogesituse ja muude kasulike funktsioonide kohta saate oma kuulmisspetsialistilt.

Lennukirežiim

Kohtades, kus tehnoloogia Bluetooth kasutamine pole lubatud (nt mõnes lennukis) võite aktiveerida lennurežiimi. See lülitab tehnoloogia Bluetooth teie kuuldeaparaadis ajutiselt välja. Kuuldeaparaat töötab ka ilma tehnoloogiata Bluetooth, kuid otsene heli voogesitus pole võimalik ja muid funktsioone ei saa kasutada.

- ▶ Lennurežiimi aktiveerimiseks vi inaktiveerimiseks kasutage nutitelefoni rakendust või oma kuuldeaparaadi juhtelemente.

Lisateavet leiate jaotisest „Juhtnupud”.

Märkuandetoon näitab lennurežiimi aktiveerimist või inaktiveerimist.

Heli induktsioonsilmused (valikuline)

Mõni telefon ja avalik koht (nt teater) pakub helisignaali (muusika ja kõne) heli induktsioonsilmuste kaudu. Selle süsteemiga saavad teie kuuldeaparaadid võtta soovitud signaali vastu ilma häiriva keskkonnamürata.

Üldjuhul on heli induktsioonsilmuseid võimalik ära tunda kindlate märkide järgi.



Kui soovite seda süsteemi kasutada, on nõutav spetsiaalne patareikamber. See on tarvikuna saadaval ainult teatud tüüpi kuuldeaparaatide puhul. Küsige lisateavet oma kuulmisspetsialistilt.

Kui olete heliinduktsiooni ahelaga kohas:

- ▶ lülitage telefonipooli programmile.

Kui telefonipooli programm on teie kuuldeaparaatide jaoks konfigureeritud, on see loetletud jaotises „Kuulmisprogrammid”.

Telepooli programm ja kaugjuhtimine



TÄHELEPANU

Traadita ühenduvusega aparaatide korral:

kui telepooli programm on aktiivne, võib kaugjuhtimispuhlt põhjustada pulseerivat müra.

- ▶ Kasutage kaugjuhtimispuhlt üle 10 cm (4 tolli) vahemaa puhul.

Hooldus

Kahjustuste vältimiseks on oluline, et hooldate oma kuuldeaparaate ja järgite mõnd põhireeglit, millest saab peagi teie igapäevane tegevus.

Kuldeaparaadid

Kuivatamine ja hoiustamine

- ▶ Laske kuuldeaparaatidel terve öö kuivada.
- ▶ Kui te kuuldeaparaate pikema aja jooksul ei kasuta, hoidke neid kuivas keskkonnas avatud akukambri ja eemaldatud akudega.
- ▶ Küsige lisateavet oma kuulmisspetsialistilt.

Puhastamine

Kuldeaparaatidel on kaitsekate. Kuid ebaregulaarse puhastamise korral võite kuuldeaparaati kahjustada või põhjustada kehalisi vigastusi.

- ▶ Puhastage kuuldeaparaati iga päev pehme kuiva lapiga.
- ▶ Ärge kasutage kunagi voolavat vett ega kastke seadet vette.
- ▶ Ärge aparaati puhastades suruge seda.
- ▶ Küsige kuulmisspetsialistilt soovitatavaid puhastusvahendeid, spetsiaalseid hoolduskomplekte või lisateavet kuuldeaparaatide heas seisukorras hoidmiseks.



Kuularid


Puhastamine

Kuularitele võib koguneda kõrvavaiku. See võib mõjutada helikvaliteeti. Puhastage kuulareid iga päev.

Kõikide kuularitega toimige järgmiselt:

- ▶ Puhastage kuularit kohe pärast eemaldamist pehme kuiva lapiga.

See hoiab ära kõrvavaigu kuivaks ja kõvaks muutumise.

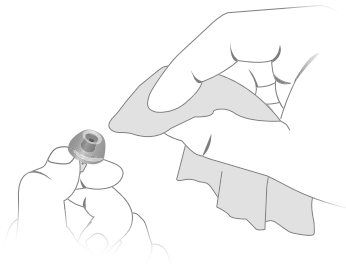

Click Domes või Click Sleeves jaoks:

- ▶ Pigistage kuulari otsa.




Vahetamine

Vahetage standardseid kuulareid umbes iga kolme kuu tagant. Asendage need varem, kui märkate mõrasid või muid muutusi. Standardsete kuularite vahetamise protseduur on kuulari tüübist. Jaotises „Osad ja nimetused” on teie kuulmisspetsialist märkinud teie kuulari tüübi.


Vahetamine Click Domes

- ▶ Vanade kuularite Click Dome eemaldamiseks kasutage eemaldamistöõriista või järgige kuularite Click Domes pakendil olevaid juhiseid. Olge ettevaatlik, et te vastuvõtja kaablit ei tõmbaks.

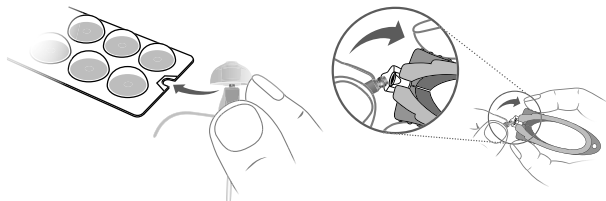


Eemaldamistöõriist on saadaval tarvikuna.

- ▶ Jälgige eriti hoolikalt, et uus Click Dome märgatavalt paigale klõpsataks.
- ▶ Kontrollige, et uued kuularid Click Dome istuksid kindlalt paigas.

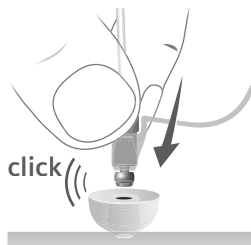

Detaili Click Sleeves vahetamine

- ▶ Keerake Click Sleeve pahempidi.
- ▶ Võtke detailist Click Sleeve ja vastuvõtjast (mitte vastuvõtja juhtmest) sõrmedega kinni ja tõmmake Click Sleeve ära.
- ▶ Jälgige eriti hoolikalt, et uus Click Sleeve märgatavalt paika klõpsataks.

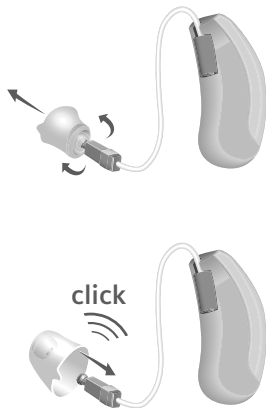

Professionaalne hooldus

Teie kuulmisspetsialist saab teha põhjaliku professionaalse puhastamise ja hoolduse.

Kohandatud kuularid ja vaigufiltrid peab vajaduse korral välja vahetama kuulmisspetsialist.

Küsige kuulmisspetsialistilt isiklikke soovitusi hooldusintervallide ja toe kohta.

Lisateave

Ohutusteave

Täiendavat ohutusteavet leiate seadmega kaasas olnud ohutusjuhendist.

Tarvikud

Saate kasutada pulti Smartphone App kuuldeaparaadi mugavaks kaugjuhtimiseks. Rakenduse abil saab inaktiveerida ka signaaltoone, luua eraldi heliprofiile ja kasutada paljusid muid funktsioone.

Saate kasutada ka kaugjuhtimispulti.

Küsige lisateavet oma kuulmisspetsialistilt.

Selles dokumendis kasutatavad sümbolid



Viitab olukorrale, mille tõttu võib tekkida tõsisaid, keskmisi või kergeid vigastusi.



Näitab võimalikku varakahju.



Nõuanded ja näpunäited seadme paremaks käsitsemiseks.

Made for

iPhone | iPad | iPod

„Made for iPhone”, „Made for iPad” ja „Made for iPod” tähendab, et elektrooniline lisaseade on mõeldud vastavalt iPhone'i, iPadi või iPodiga ühendamiseks ning seadme tootja tagab, et seade

vastab Apple'i tööstandarditele. Apple ei vastuta selle seadme toimimise ega ohutus- ja seaduses sätestatud standarditele vastavuse eest. Pange tähele, et selle lisatarviku kasutamine koos iPhone'i, iPadi või iPodiga võib mõjutada juhtmevaba ühenduse jõudlust.

Tõrkeotsing

Probleem ja võimalikud lahendused

Helitugevus on nõrk.

- Suurendage helitugevust.
 - Vahetage tühi aku välja.
 - Puhastage kuularit või vahetage see välja.
-

Kuuldeaparaat tekitab vilistavat heli.

- Pange kuular uuesti kõrva, kuni see on kindlalt paigas.
 - Vähendage helitugevust.
 - Puhastage kuularit või vahetage see välja.
-

Heli on moonutatud.

- Vähendage helitugevust.
 - Vahetage tühi aku välja.
 - Puhastage kuularit või vahetage see välja.
-

Kuuldeaparaat tekitab signaaltoone.

- Vahetage tühi aku välja.
-

Probleem ja võimalikud lahendused

Kuuldeaparaat ei tööta.

- Lülitage kuuldeaparaat sisse.
 - Pange akukamber ettevaatlikult täiesti kinni.
 - Vahetage tühi aku välja.
 - Veenduge, et aku on õigesti sisestatud.
 - Viivitusega käivitus on aktiivne. Oodake mõni sekund ja proovige uuesti.
-

Muude probleemide ilmnemisel küsige nõu kuulmisspetsialistilt.

Riigipõhine teave

Ameerika Ühendriigid ja Kanada

Traadita funktsionaalsusega kuuldeaparaatide
sertifitseerimisteave:

Pure 312 Nx

- FCC Nr: SGI-RIC002
- IC: 267AB-RIC002

Pure 13 Nx (telecoil'i valikuta)

- FCC Nr: SGI-RIC001
- IC: 267AB-RIC001

Pure 13 Nx [T] (telecoil'i valikuga)

- Sisaldab FCC ID-d: SGI-RFM001
- IC: 267AB-WP4N1









Hooldus ja garantii

Seerianumbrid

Seade

Vastuvõtuseade

Vasak:

Parem:

Hoolduse kuupäevad

1:

4:

2:

5:

3:


6:


Garantii



Ostukuupäev:

Garantiaaeg kuudes:

Teie kuulmisspetsialist



 **Seaduslik tootja**
Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Saksamaa
Telefon +49 9131 308 0



Document No. 03326-99T04-8V00 ET
Order/Item No. 109 507 95
Master Rev05, 01.2020
© 01.2020, Signia GmbH. All rights reserved

CE
0123

www.signia-hearing.com

